

RÖNTGENSCHUTZ


Für Anwender und Patienten



PRODUKTKATALOG

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	03
Leitfaden zur Konfiguration	06
Digitale Röntgenschürzenverwaltung	07
Standardgrößen und Schutzmaterial	08
Schutzmaterial "Made in Germany"	09
Weste & Rock	10
Frontröntgenschürzen	14
Röntgenschutzmäntel	24
Komfortoptionen	29
Röntgenschutz Zubehör	32
Röntgenschutzbrillen	38
Patientenschutz	42
Aufbewahrungssysteme	51
Weiterer Patientenschutz	54

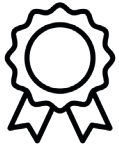

**Höchste Qualität und
erstklassige Verarbeitung
"Made in Germany"**



Maximale Sicherheit und Schutz



**Individuelle Anpassung für
den höchsten Tragekomfort**



**Kundenzufriedenheit im
Fokus**



**Einfache und unkomplizierte
fachkundige Beratung**



**Schnelle Auftragsabwicklung,
3 Wochen Lieferzeit**

Über uns

Die Dr. Goos Suprema GmbH steht seit über 50 Jahren für qualitativ hochwertige Röntgenschutzkleidung „Made in Germany“. Als erfahrener Hersteller vereinen wir höchste Sicherheitsansprüche mit deutscher Handarbeit und modernster Materialtechnologie. Unsere Produkte erfüllen die strengen europäischen Normen (DIN EN 61331-3 und DIN EN 61331-1) und garantieren maximalen Schutz für den Anwender.

Am Standort in Heidelberg fertigen wir unsere Röntgenschürzen per Hand, unter Verwendung innovativer und leichter Materialien, die nicht nur optimalen Schutz bieten, sondern auch maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Die Dr. Goos Suprema GmbH bietet eine breite Auswahl an Größen, Farben und Modellen und legt besonderen Wert auf Qualität und Ergonomie, um den alltäglichen Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht zu werden.



Unsere Röntgenschutzkleidung wird in Heidelberg nach höchsten deutschen Qualitätsstandards gefertigt. Mit über 50 Jahren Erfahrung bieten wir Ihnen eine präzise und zuverlässige Verarbeitung. Vertrauen Sie auf unsere deutsche Handwerkskunst und erleben Sie herausragenden Schutz und Komfort.



Maßangefertigte Röntgenschürzen

Gerne besuchen wir Sie vor Ort, um 14 Körpermaße exakt zu erfassen und sicherzustellen, dass Ihre Röntgenschutzkleidung perfekt sitzt. Dadurch garantieren wir Ihnen maximalen Strahlenschutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht.

Mit unserem speziellen "Measure-to-Fit"-Service gewährleisten wir Ihnen höchsten Tragekomfort:

- 1) Wir verwenden leichte Schutzmaterialien und bieten zudem eine bleifreie Option an, die die strengen Anforderungen der IEC 61331-1 2014 BBG* erfüllt.
- 2) Durch die exakte Vermessung von 14 Körperpunkten passen wir die Röntgenschürze individuell an Ihre Körperform an. So entsteht ein Kleidungsstück, das optimal schützt und perfekt sitzt, in Übereinstimmung mit der IEC 61331-3 2014 Norm.
- 3) Unsere Röntgenschürzen sind mit verschiedenen Ausstattungsoptionen verfügbar, die das Gewicht gleichmäßig verteilen, um die Belastung von den Schultern zu reduzieren. Zum Beispiel bieten unsere Röcke optional einen Komfortgurt, der für sicheren Halt sorgt, ohne zu verrutschen.

Measure-to-Fit Verfahren



Termin buchen



Körpermaße messen



Bestellen

Bestimmung der Konfektionsgröße - Unisex

	XS	S	M	L	XL	XXL
Brustumfang (<=)	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	>130 cm
Taillenumfang (<=)	—	76 cm	90 cm	104 cm	116 cm	>130 cm
Hüftumfang (<=)	—	102 cm	116 cm	130 cm	144 cm	>154 cm

Bestimmung der Längenmaße

	Short	Regular	Long	XLong	XXLong
Frontschürze / Mantel (<=)	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm
Rock (<=)	55 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm
Weste (<=)	55 cm	60 cm	65 cm	—	—



Leitfaden zur Konfiguration Ihrer Röntgenschürzen

Mit Hilfe unseres Leitfadens gelingt es Ihnen im Handumdrehen ihre Röntgenschürze zu konfigurieren:

Schritt 1

Auswahl des Röntgenschürzen Modelles




Einteiler (S.19)



Zweiteiler (S.10)

Schritt 2

Bestimmung der Größe

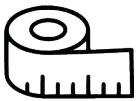

Unser Außendienst vermisst Sie gerne auch persönlich.

Schritt 3

Auswahl der Ausstattungsoptionen



Komfort Optionen
(S.29)



Zubehör
(S.32)

Farben

Entdecken Sie unsere Vielfalt an Farben



Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren



Digitale Röntgenschürzenverwaltung

Die Röntgenschürzen von Dr. Goos Suprema haben zahlreiche Alleinstellungsmerkmale. Dazu zählen unsere RFID-Technologie und unser besonders leichtes bleifreies Schutzmaterial, welches nach strengsten deutschen Qualitätsstandards gefertigt wird.

Unser Blei- und Leichtbleischutzmaterial ist bis 150 kV getestet und kann bedenkenlos in allen Bereichen des Krankenhauses eingesetzt werden.



Cloud Based



Hand Ready

RFID-Technologie für Röntgenschutzkleidung, effiziente Inventarisierung und Wartung

Die Röntgenschürzen der Dr. Goos Suprema GmbH werden ab Werk mit einem RFID Chip ausgestattet. Zusätzlich werden die Daten der neuen Röntgenschürzen automatisch in unserer Cloud Datenbank erfasst. Dies ermöglicht es Ihnen Ihre Röntgenschürzen digital zu verwalten. Sprechen Sie uns gerne an, damit wir Sie in die digitale Verwaltung der Röntgenschutzkleidung einführen können.

Unsere RFID-Lösung ermöglicht die schnelle und präzise Prüfung der Bestandsschürzen. Mit Hilfe der verbauten RFID-Chips und einem Handscanner mit bis zu 10 Metern Reichweite können zur Prüfung fällige Röntgenschürzen gezielt lokalisiert und geprüft werden. Bestehende Röntgenschürzen können problemlos mit unseren RFID Chips nachgerüstet werden. Die Inventarisierungsdaten können in der Cloud-Datenbank gespeichert werden und die Wartung dokumentiert werden.

Schutzmaterial

Schutzmaterial "Made in Germany"

Unser Schutzmaterial durchläuft mehrere Qualitätskontrollen, bevor es an den Endkonsumenten ausgeliefert wird. Jeder Meter Schutzmaterial wird auf das Flächengewicht kontrolliert.



Schutzmaterial

Flächengewicht (kg/m ²)	
Bleigleichwert (mm Pb)	
Röntgenröhrenspannung	50 kV
	70 kV
	90 kV
	110 kV
	150 kV

SupraNorm
Standard Bleigummimaterial
 zugelassen von 50 - 150 kV.

Das Standard Bleigummimaterial SupraNorm besteht aus reinem Blei auf Naturkautschukbasis. Es ist etwas schwerer als das leichte Bleigummimaterial, bietet jedoch konstanten Strahlenschutz gemäß DIN EN 61331-1.

SupraLight Plus
Leichtes Bleigummimaterial
 zugelassen von 50 - 150 kV.

Dieses innovative, leichte Bleigummimaterial bietet die gleiche Strahlensicherheit wie herkömmliche Optionen, reduziert aber das Gewicht der Röntgenschutzkleidung um bis zu 15 %. Besonders an Arbeitsplätzen mit langen Tragezeiten ist die SupraLight plus Variante die ideale Wahl.

Mit den SupraLight-Röntgenschutzschürzen arbeitet man flexibler und leichter, ohne dabei die Sicherheit zu gefährden.

SupraSine
Bleifreies Material
 zugelassen von 50 - 110 kV.

Das SupraSine bleifreie Schutzmaterial stellt unsere leichteste Variante des Schutzmaterials dar. Es bietet einen hervorragenden Schutz vor Streustrahlung. Sollten Sie eine möglichst leichte Röntgenschürze suchen ist das SupraSine Schutzmaterial die perfekte Wahl für Sie.


SupraNorm Blei			SupraLight Plus Leichtblei			SupraSine Bleifrei		
3.30	4.50	6.60	3.10	4.40	6.30	2.80	4.00	5.70
0.25	0.35	0.50	0.25	0.35	0.50	0.25	0.35	0.50
99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%
95%	98%	99%	96%	98%	99%	95%	97%	>99%
90%	94%	96%	92%	95%	97%	91%	94%	97%
86%	91%	95%	89%	93%	96%	86%	90%	95%
84%	86%	92%	83%	90%	93%	79%	84%	91%

NACHHALTIGKEIT

Unsere Schutzmaterialien werden mit Hilfe von Naturkautschuk hergestellt und bieten Ihnen die nachhaltigste Röntgenschürze, welche aktuell verfügbar ist. Zusätzlich ist das Material aufgrund der geringen Materialhärte von Naturkautschuk sehr flexibel.



Weste & Rock

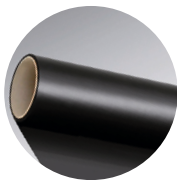

Verschiedene
Schutzmaterialien



Zahlreiche
Außenstoffe



Diverse
Zubehöroptionen



Inventarisierung in
Cloud-Datenbank

Röntgenschürzen - Weste & Rock

Weste und Rock - Zweiteiler Modell SL RW 28 Duplex

Die Zweiteilermodelle SL RWS 28 Simplex und SL RW 28 Duplex bieten optimale Flexibilität und Komfort in der Röntgenschutzkleidung. Durch die Kombination von Weste und Rock wird das Gewicht gleichmäßig auf Schulter und Taille verteilt, was eine hervorragende Beweglichkeit ermöglicht.

- ✓ Gleichmäßige Gewichtsverteilung durch Weste- und Rock-Kombination
- ✓ Einfache Anwendung: zuerst Rock, dann Weste anziehen
- ✓ Flexible Anpassung an den Taillenumfang dank farblich abgesetztem Einsatz
- ✓ Innovative Röntgenschutzkleidung zur Erleichterung des Arbeitsalltags



Weste und Rock - Zweiteiler Modell SL RWS 28 Simplex

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Brusttasche
- Bestickung

Weste-Duplex Modell SL W 28

Die Weste-Duplex Modell SL W 28 bietet durch die Überlappung im Frontbereich doppelten Bleigleichwert und damit zusätzlichen Röntgenschutz. Diese Röntgenschutzkleidung überzeugt durch einfache Handhabung und hohen Tragekomfort.

- ✓ Doppelter Bleigleichwert durch Überlappung im Frontbereich
- ✓ Praktischer Schulterverschluss für sicheren Sitz
- ✓ Einfache Anwendung: Klettenteile an der rechten Innenseite verbinden, dann seitlich und an der Schulter schließen
- ✓ Ideal für zuverlässigen Röntgenschutz und komfortable Handhabung

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung



Weste-Simplex Modell SL WS 28

Die Weste-Simplex Modell SL WS 28 bietet optimalen Röntgenschutz und Komfort. Sie ähnelt unserem Rundum-Mantel und lässt sich einfach mit zwei breiten Klettenbändern vorne schließen.

- ✓ Optimaler Röntgenschutz und Komfort
- ✓ Ähneln dem Rundum-Mantel
- ✓ Einfache Handhabung durch zwei breite Klettenbänder vorne
- ✓ Ideal für schnelle und sichere Anwendung

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung



Röntgenschutzweste Triplex





Produktbeschreibung

Die Triplex Weste bietet umfassenden Röntgenschutz mit optimalem Front- und Rückenschutz. Ihr Design sorgt für gleichmäßige Gewichtsverteilung und erhöhten Tragekomfort durch integrierte Rückenunterstützung.

Die Triplex Weste bietet den höchsten Tragekomfort, welcher derzeit verfügbar ist.

- ✓ Ausgezeichneter Front- und Rückenschutz
- ✓ Gleichmäßige Gewichtsverteilung
- ✓ Integrierte Rückenunterstützung
- ✓ Ideal für lange Einsätze

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung

Röntgenschutzweste - Amazon



Produktbeschreibung

Die Amazone Weste ist eine speziell für Frauen entwickelte Röntgenschürze, die optimalen Röntgenschutz bei höchstem Tragekomfort bietet. Der Schnitt ist perfekt auf die weibliche Silhouette abgestimmt und deckt Lymphknoten, Achselhöhlen und den oberen Nackenbereich umfassend ab.

- ✓ Entwickelt für Frauen
- ✓ Umfassender Schutz für Lymphknoten, Achselhöhlen und oberen Nackenbereich
- ✓ Passt sich ideal der weiblichen Silhouette an
- ✓ Leichtes Design – eines der leichtesten Röntgenschutzmodelle auf dem Markt
- ✓ Einfache Handhabung dank praktischem Reißverschluss

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung

Konfektionsgröße

	S	M	L	XL
Brustumfang	91	101	111	121
Hüftumfang	97	107	117	127

Rock Modell SL R 28

Der Rock Modell SL R 28 bietet hervorragenden Komfort und zuverlässigen Röntgenschutz. Mit seinem flexiblen Design und zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen sorgt er für optimalen Sitz und höchsten Schutz.

- ✓ Sicherer Verschluss durch Klettverschluss und zusätzlichen Stretchgürtel an der Taille
- ✓ Integrierte Schlaufen für einfache Aufbewahrung
- ✓ Flexible Anpassung an den Taillenumfang dank farblich abgesetztem Einsatz
- ✓ Optimaler Sitz und maximaler Röntgenschutz
- ✓ Höchster Komfort und Sicherheit in der Röntgenschutzkleidung


Zusatzoptionen

- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Integrierter Unterstützungsgürtel
- Bestickung





Frontschürzen

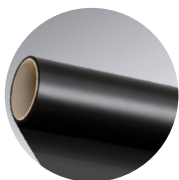

Verschiedene
Schutzmaterialien



Zahlreiche
Außenstoffe



Diverse
Zubehöroptionen



Inventarisierung in
Cloud-Datenbank

Frontschürzen

Frontschürze Modell SL F 26


Die Röntgenschürze SL F 26 ist ein bewährtes Modell, das durch seine durchdachte Form und den bequemen Schnitt überzeugt. Sie bietet eine ideale Kombination aus Funktionalität und schlichem Design für den Arbeitsalltag.



- ✓ Praktischer Klettverschluss auf der Vorderseite der Röntgenschürze für einfaches Anlegen
- ✓ Flexible Stretchbänder für eine optimale Passform
- ✓ Angenehme Anpassung an den Körper und komfortabler Sitz

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung

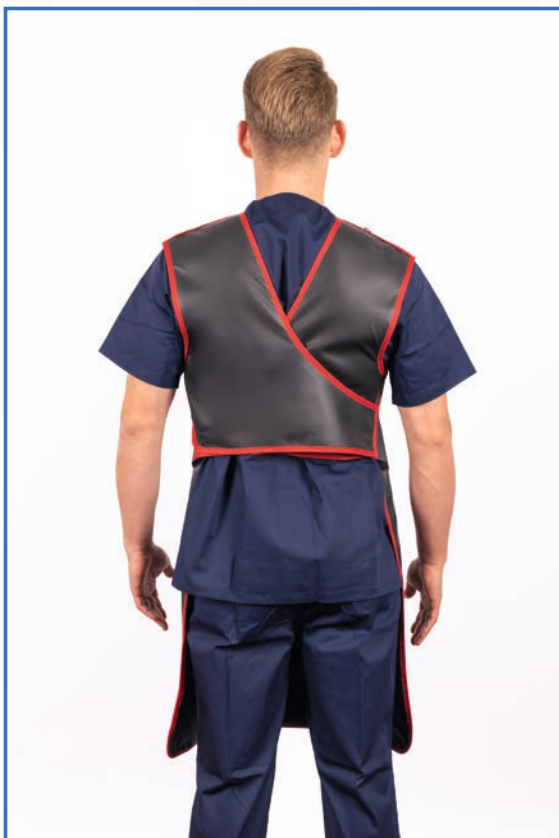

Chirurgische Multifunktionsschürze Modell SL CMF 06

Die CMF-Röntgenschürze kombiniert die Vorteile einer Frontröntgenschürze und einer chirurgischen OP-Schürze und ist ideal für den Einsatz in OP, Radiologie, Gipsraum und weiteren Bereichen geeignet. Sie bietet Schutz in anspruchsvollen Umgebungen.



- ✓ Funktion einer Röntgenschürze mit bewährtem Klettverschluss und Stretchband für eine komfortable Passform
- ✓ Flexibilität einer chirurgischen OP-Schürze, die unter dem OP-Mantel getragen und dank seitlicher und oberer Klettverschlüsse einfach ausgezogen werden kann
- ✓ Verstellbare Klettverschlüsse auf den Schultern für eine individuelle Anpassung der Halsweite

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung



Frontschürzen


Bildverstärkerschürze Modell SL BV 03

Die Röntgenschürze Modell SL BV 03 wurde speziell für den Einsatz am Bildverstärker entwickelt und ist ideal für Chirurgen, Orthopäden, Urologen sowie den Gipsraum. Dank der innovativen Bleigummi-anordnung gehört sie zu den leichtesten Röntgenschürzen, ohne Abstriche beim Schutz zu machen.

- ✓ Leichteste Frontschürzen Option
- ✓ Hohe Schutzwirkung bei maximalem Komfort
- ✓ Angenehme Anpassung an den Körper und komfortabler Sitz

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung

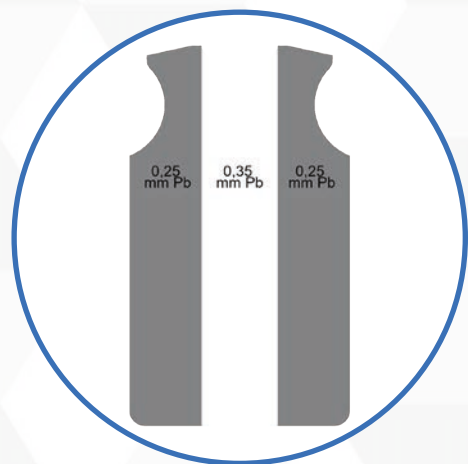

Chirurgische OP-Röntgenschürze Modell SL C 05

Die Röntgenschürze Modell SL C 05 ist ideal für den Einsatz unter dem Operationsmantel und bietet optimalen Röntgenschutz. Durch die praktischen Klettverschlüsse lässt sich die Röntgenschürze leicht unter dem sterilen Mantel hervorziehen.

- ✓ Perfekt für den Einsatz im OP
- ✓ Müheloses Entfernen durch Klettverschlüsse
- ✓ In verschiedenen Bleigleichwerten erhältlich
- ✓ Bietet Individualität und Komfort
- ✓ Zuverlässiger Schutz und maximale Flexibilität im OP


Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung





Röntgenschutzmäntel

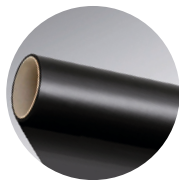

Verschiedene
Schutzmaterialien



Zahlreiche
Außenstoffe



Diverse
Zubehöroptionen



Inventarisierung in
Cloud-Datenbank

Rundum-Doppelröntgenschürze Modell SL RD 27

Die Rundum-Doppelröntgenschürze Modell SL RD 27 bietet durchdachtes Design und Komfort für Anwendungen wie Kardiologie und Endoskopie. Sie gewährleistet exzellenten Röntgenschutz und ist in zwei Bleigleichwert-Varianten erhältlich.

- ✓ Einfaches Anziehen: Klettenteile innen verbinden, Schürze seitlich und an der Schulter schließen.
- ✓ Integrierter Stretchgürtel zur Gewichtsreduzierung und verbessertem Tragekomfort.
- ✓ Zuverlässiger Röntgenschutz für anspruchsvolle medizinische Aufgaben.

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung



Röntgenschutzmantel - Triplex





Produktbeschreibung

Der Mantel Triplex bietet umfassenden Röntgenschutz in einem einteiligen Design mit durchgehendem Front- und Rückenschutz. Diese Röntgenschürze gewährleistet eine optimale Gewichtsverteilung und eine zusätzliche Rückenunterstützung für maximalen Tragekomfort und Ergonomie.

- ✓ Ideal für anspruchsvolle Anwendungen
- ✓ Effektiver Schutz
- ✓ Bequeme Passform

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung

Röntgenschutzmäntel

Rundum-Mantel Modell SL RM 25

Der Röntgenschutzmantel Modell SL RM 25 bietet umfassenden Rundum-Schutz, ideal für anspruchsvolle Spezialuntersuchungen wie in der Kardiologie. Er gewährleistet maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort.

- ✓ Hochwertiger Bleigleichwert (0,35 bzw. 0,50 mm Pb) an jeder Frontseite
- ✓ Doppelter Bleigleichwert bei Verschlussüberlappung
- ✓ Schulterpolster und Stretchgürtel für gleichmäßige Gewichtsverteilung und Entlastung
- ✓ Optimale Kombination aus Schutz und Komfort für den täglichen Einsatz

Zusatzoptionen

- iPron
- Schilddrüsenschutz
- Measure-To-Fit Service
- Konfektionsgrößen
- Brusttasche
- Bestickung



Komfortoptionen





Innenliegender Unterstützungsgurt

Der innenliegende Unterstützungsgurt verbessert den Tragekomfort bei Röntgenschutzröcken erheblich und sorgt für zusätzliche Entlastung im Lordosenbereich. Zudem garantiert er einen rutschfesten Sitz der Röntgenschutzkleidung für optimalen Schutz und Stabilität.

- ✓ Erheblicher Komfortgewinn bei Röntgenschutzröcken
- ✓ Gezielte Unterstützung im Lordosenbereich
- ✓ Spürbare Entlastung für den Anwender
- ✓ Rutschfester Sitz für zusätzlichen Schutz und Stabilität

Stretchgürtel für alle Schürzenmodelle


Separat bestellbar für Frontschürzen, Rundum-Mantel und Rundum-Doppelschürze
Breite: ca. 15 cm
Farbe: navyblau



Rückenstützgürtel

Der Rückenstützgürtel bietet hervorragenden Komfort und Unterstützung für die Wirbelsäule. Er wird über der Röntgenschürze getragen und sorgt durch ein innovatives Design für eine ergonomische Arbeitsposition und eine reduzierte körperliche Belastung.


- ✓ Nachspanngurt und Klettenband zur Fixierung
- ✓ Reduziert das Gewicht der Röntgenschürze
- ✓ Entlastet die Wirbelsäule bei längeren Anwendungen

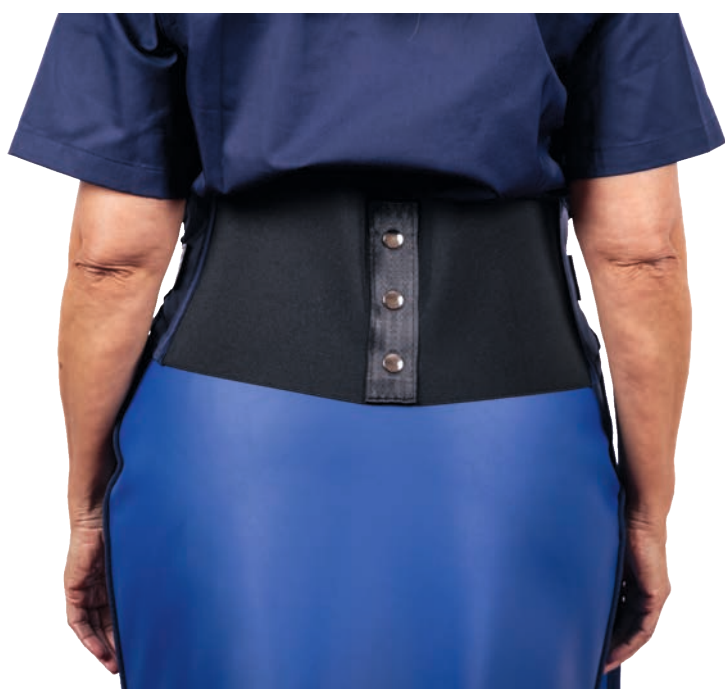

Stretchgürtel für Rock

Separat bestellbar für Röcke.
Breite: ca. 15 cm
Farbe: navyblau

Röntgenschutz Zubehör

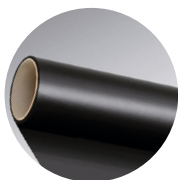

Verschiedene
Schutzmaterialien



Zahlreiche
Außenstoffe



Diverse
Zubehöroptionen



Inventarisierung in
Cloud-Datenbank

Schilddrüsenschutz Modellreihe SD

Der Schilddrüsenschutz sorgt für einen hohen Schutz der Schilddrüse und sollte bei allen Untersuchungen in Bereichen, wie z.B. Herzkatheter, Angiographie usw. getragen werden.

Schilddrüsenschutz Modell SD Small

Für optimalen Schutz der Schilddrüse und des Sternum, in Ergänzung zur Röntgenschürze. Halsumfang: 38-45 cm (Kappenform). Abbildung mit Druckknopfverbindung an der Schürze.

Schilddrüsenschutz Modell SD Standard

Für optimalen Schutz der Schilddrüse und des Sternum, in Ergänzung zur Röntgenschürze. Halsumfang: 40-52 cm (Kappenform). Mond weiter ausgelegt.

Schilddrüsenschutz Modell SD Einteiler



Mit Magnetverschluss



Mit Klettverschluss

Hygienefutteral für Schilddrüsenschutz

Unsere Hygienefutterale bieten zuverlässigen Schutz und hygienische Sauberkeit für alle Schilddrüsenschutzmodelle.

Einmal-Hygienefutteral

Hergestellt aus hochwertigem, weißem Vlies, ideal für den einmaligen Gebrauch.

Waschbares Baumwolle-Hygienefutteral

Gefertigt aus vorgewaschener, blauer Baumwolle, mehrfach verwendbar und waschbar.



Röntgenschutz-Haube Röntgenschutz-Haube mit atmungsaktiver Öffnung

Die Röntgenschutz-Kappe bietet zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort durch ihre atmungsaktive Öffnung. Ideal für längere Anwendungen, bei denen Röntgenschutz und Luftzirkulation gleichermaßen wichtig sind.

- ✓ Zuverlässiger Schutz
- ✓ Hoher Tragekomfort
- ✓ Atmungsaktive Öffnung
- ✓ Ideal für längere Anwendungen
- ✓ Optimale Kombination aus Röntgenschutz und Luftzirkulation



Röntgenschutz-Handschuhe Modell KLH

Dieses Produkt entspricht der DIN 61331-3 und bietet die Standardausführung mit Fingern.

- ✓ Herstellung nach DIN 61331-3
- ✓ Bei der Lieferung werden Baumwollhandschuhe beigelegt



Chirurgische strahlenabsorbierende OP-Handschuhe Modell OP H

Unsere OP-Handschuhe mit integriertem Röntgen- und Strahlenschutz bieten optimale Sicherheit für den chirurgischen OP-Bereich. Sie sind ideal für Eingriffe wie Herzkatheter-Diagnostik, koronare Angioplastie und Angiokardiographie.

- ✓ Anatomische Form für hervorragendes Tastgefühl und Fingerfertigkeit
- ✓ Leicht angeraute Oberfläche für zusätzlichen Grip
- ✓ Hohe Dehnbarkeit für maximalen Komfort
- ✓ Einwegartikel, paarweise steril verpackt für höchste Hygiene und Sicherheit im OP



Chirurgische Röntgenschutz- Handschuhe mit Daumenschutz Modell CH

Die chirurgischen Röntgenschutz-Handschuhe Modell CH bieten optimalen Röntgenschutz und Flexibilität, ideal für verschiedene medizinische Anwendungen. Sie sind auch für den Einsatz im Veterinärbereich geeignet.

- ✓ Ideal beim Spritzen, Palpieren, für chirurgische Zwecke und beim Halten von Kleinkindern bei Röntgenaufnahmen
- ✓ Seitlich verstärkt für bessere Haltbarkeit
- ✓ Mit zusätzlichem Daumenschutz

Ärmel für Röntgenschürzen

Unsere Ärmel für Röntgenschürzen lassen sich flexibel per Druckknöpfe links oder rechts anbringen und bieten zusätzlichen Schutz. Auf Anfrage sind auch Epauletten verfügbar; bei Bedarf können die Ärmel direkt angenäht werden.

- ✓ Einfache Befestigung mit Druckknöpfen
- ✓ Flexible Anbringung links oder rechts
- ✓ Epauletten auf Anfrage erhältlich
- ✓ Optional: Ärmel fest angenäht



Beschriftung auf unserer Röntgenschutzkleidung

Wir bieten maßgeschneiderte Stickereien für Ihre Röntgenschutzkleidung an, um eine klare Kennzeichnung zu gewährleisten. Die Bestickung kann an folgenden Stellen platziert werden:

- ✓ Direkt auf der Brusttasche
- ✓ Auf der Bordüre oder Schulter (weiß auf navyblauem Untergrund)
- ✓ Auf dem Klettenband (Flauschteil und Haken, anpassbar)
- ✓ Optional auf anderen Teilen wie dem Rock oder dem Schilddrüsenschutz
- ✓ Steg oder Mond

Die Stickerei kann ein- oder zweizeilig erfolgen, und die Schrifthöhe wird je nach Textlänge angepasst.



Stickerei



Stickerei auf Klettband



Klettenbürste

Die Klettenbürste eignet sich perfekt zur Reinigung und Auffrischung der Klettverschlüsse an Ihren Röntgenschürzen. Sie entfernt effektiv Flusen und Verschmutzungen von den Flausch- und Hakenflächen, um die Funktionalität der Verschlüsse zu erhalten und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Desomed-Rapid-Universal „SupraPflege“

Für die Reinigung, Desinfektion und Pflege der Außenmaterialien unserer Schutzkleidung und des Zubehörs bieten wir unser Reinigungsmittel Desomed-Rapid-Universal an. Es wird in einer Flasche mit 500 ml Inhalt oder als 1000 ml Flasche mit Sprayer geliefert (gebrauchsfertig, aldehydfrei).



Röntgenschutzbrillen



Röntgenschutzbrillen Modellreihe RSB

Die Röntgenschutzbrillen der Modellreihe RSB bieten effektiven Schutz für Ihre Augen, indem sie die Strahlenbelastung durch Röntgenstrahlen erheblich reduzieren. Mit einem Bleigleichwert von 0,50 mm absorbieren sie 90-99 % der Streustrahlen bei 80 kV. Zum Schutz der Augen bieten wir daher verschiedene Modelle von Strahlenschutzbrillen, auch mit seitlichem Schutz an.



Modell RSB 8/PB (90 g)*

Die Röntgenschutzbrille Modell RSB 8/Pb (90 g)* bietet modernen Schutz mit einem robusten Kunststoffrahmen und zusätzlichem Seitenschutz für umfassende Sicherheit. Sie kommt inklusive praktischem Halteband für einen sicheren Sitz.

Bleigleichwert: Front: 0,75mm Pb
Seitenschutz: 0,50mm Pb
Rahmenfarbe: Braun



Modell RSB 8A/Pb (85 g)*

Die Röntgenschutzbrille Modell RSB 8A/Pb kombiniert modernen Schutz mit einem robusten Kunststoffrahmen und zusätzlichem Seitenschutz für umfassende Sicherheit.

Inklusive praktischem Halteband

Bleigleichwert: Front: 0,50mm Pb
Seitenschutz: 0,50mm Pb
Rahmenfarbe: Rot Blau Schwarz
(Farbänderungen vorbehalten)

Modell RSB 10/Pb (76 g)

Die Röntgenschutzbrille Modell RSB 10/Pb bietet zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort durch ihren gewölbten Rahmen und das praktische Halteband.

Bleigleichwert: 0,75mm Pb
Rahmenfarbe: Rot Blau Schwarz

Modell RSB 21/Pb (88 g) - weiß

Die Röntgenschutzbrille Modell RSB 21/Pb (88 g) bietet umfassenden Röntgenschutz als Überziehbrille mit zusätzlichem Seitenschutz und einem praktischen Halteband für sicheren Sitz.

Inklusive Halteband für sicheren Sitz

Bleigleichwert: Front: 0,75mm Pb

Kunststoffrahmen

Rahmenfarbe: Weiß



Modell RSB 22/Pb (88 g) - schwarz

Die Röntgenschutzbrille Modell RSB 22/Pb bietet umfassenden Schutz mit zusätzlichem Seitenschutz und einem sicheren Sitz durch das Halteband. Ideal als Überziehbrille für Ihre Sicherheit.

Bleigleichwert: Front: 0,75mm Pb

Kunststoffrahmen

Rahmenfarbe: Schwarz



Röntgenschutzvisier

Das Röntgenschutzvisier schützt effektiv den Kopfbereich mit einem transparenten, aufklappbaren Visier aus leichtem Bleiacrylglas. Es ist einfach verstellbar und passt sich jeder Kopfgröße an.

Bleigleichwert: 0,75mm Pb

Material: Bleiacrylglas

Rahmenfarbe: Transparent

Aufklappbares Visier

RSB 51/Pb *

- ✓ Schlanker Rahmen
- ✓ Gummiertes Nasenstück
- ✓ Rutschfeste Bügel
- ✓ Integrierte Seitenschilde für zusätzlichen Röntgenschutz

**RSB 52/Pb ***

- ✓ Der mittelbreite Rahmen verfügt über ein rutschfestes, gummiertes Nasenstück und Bügel, die für einen festen Sitz sorgen.
- ✓ Die integrierten Seitenschilde bieten zusätzlichen Röntgenschutz und eine umfassende Abdeckung, sodass Sie stets bestens geschützt sind.

**RSB 54/Pb ***

- ✓ Der breite Rahmen verfügt über ein verstellbares, gummiertes Nasenstück, das sich an verschiedene Nasensteggrößen anpasst und so für einen sicheren und bequemen Sitz sorgt.
- ✓ Mit einem großen Sichtbereich und integrierten Seitenschildern bietet diese Brille optimalen Röntgenschutz für Ihre Augen und optimale Abdeckung aus jedem Winkel.



Patientenschutz



Halbröntgenschürze Modell SN HSP 10

Die Halbschürze Modell SN HSP 10 schützt zuverlässig den Gonadenbereich während Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereichs.

- ✓ Erhältlich in verschiedenen Größen und Verschlussvarianten
- ✓ Mit Hüftspannbügel für einfaches An- und Ablegen
- ✓ Optional mit Klettverschluss, ideal für Kinder



Gonaden-Rundumrock Modell SN 06

Der Gonaden-Rundumrock Modell SN 06 bietet umfassenden Gonadenschutz und ist eine praktische Alternative zur Halbschürze.

- ✓ Dank der Klettenbänder an den vorderen Teilen lässt sich der Rock einfach und flexibel anlegen.
- ✓ Für eine praktische Aufbewahrung sind Schlaufen integriert.



Ovarial-Protector Modell OP

Der Ovarial-Protector Modell OP bietet zuverlässigen Schutz für weibliche Patienten bei Röntgenuntersuchungen im Beckenbereich.

- ✓ Effektiver Schutz bei Aufnahmen von Hüftgelenk, Oberschenkel und Lendenwirbelsäule
- ✓ Hygienischer, leicht zu reinigender PVC-Überzug
- ✓ Reinigung und Desinfektion mit SupraPflege siehe Seite 37
- ✓ Erhältlich in fünf Standardgrößen sowie einer Sondergröße für Säuglinge
- ✓ Schachtartige Fortsetzung schützt auch höherliegende Ovarien



Ovarial-Protector mit Stretch-Hüftgürtel für Stehaufnahmen Modell OP

Der Ovarial-Protector Modell OP bietet effektiven Patientenschutz für weibliche Patienten bei Stehaufnahmen.

- ✓ Set umfasst einen Stretch-Hüftgürtel und drei Größen Ovarial-Protectoren, die mit einem Klettenpunkt am Gürtel befestigt werden.
- ✓ Gürtel schließt bequem mit Klettenband im Rücken und ist auf der Aufnahme nicht sichtbar
- ✓ Reinigung und Desinfektion mit Supra-Pflege siehe Seite 37.



Flexibler Gonadenschutz Modell T-Shield

Der flexible Gonadenschutz Modell T-Shield bietet männlichen Patienten optimalen Röntgenschutz und hohen Komfort. Er lässt sich einfach mit Klettbändern zu einer schützenden Kapsel formen und passt sich so individuell an.

Die Innenseite des Gonadenschutzes besteht aus SupraSoft Material, das leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist. Für zusätzliche Hygiene sind passende Einweg-Hygienebeutel in verschiedenen Größen erhältlich.

- ✓ Einweg-Hygienebeutel in verschiedenen Größen erhältlich
- ✓ Innenseite aus SupraSoft Material, einfach zu reinigen und desinfizieren

100 Stück Pro Packung je Größe

300 Stück pro Packung im Satz

Größen: Small 80x120mm|Medium 120x170mm|Large 160x250mm



Flexibler Gonadenschutz mit Stretch-Hüftgürtel (Stehaufnahmen) Modell T-Shield

Der flexible Gonadenschutz Modell T-Shield ist speziell für männliche Patienten bei Stehaufnahmen konzipiert. Er bietet sicheren Schutz und komfortable Anpassung während der Anwendung.

- ✓ Verstellbare Klettbänder formen den Röntgenschutz einfach zu einer sicheren Kapsel
- ✓ Innenseite aus hochwertigem SupraSoft-Material für einfache Reinigung und Desinfektion mit SupraPflege Siehe Seite 37
- ✓ Integrierte Schlaufen und elastischer Hüftgürtel sorgen für einen komfortablen und festen Sitz



Rundum-Mantel jr. Modell SL RM jr 18

Der Röntgenschutzmantel jr. Modell SL RMjr 18 bietet Kindern umfassenden Rundumschutz bei Röntgenuntersuchungen.

- ✓ Entwickelt für optimalen Röntgenschutz
- ✓ Ideal angepasst an die Bedürfnisse junger Patienten.



Frontröntgenschürze jr. Modell SL Fjr 17

Die Frontröntgenschürze jr. Modell SL Fjr 17 bietet speziell entwickelten Röntgenschutz für Kinder.

- ✓ Ideal angepasst an die Bedürfnisse junger Patienten.
- ✓ Sicherstellung des Patientenschutzes für junge Menschen
- ✓ Optimaler Schutz bei maximalem Komfort

Testes-Kapsel

Diese speziell entwickelte Testes-Kapsel bietet zuverlässigen Gonadenschutz für Kleinkinder. Sie sorgt für Sicherheit während röntgendiagnostischer Untersuchungen und ist komfortabel zu tragen.

- ✓ Ideal für den sicheren Röntgenschutz empfindlicher Bereiche



Brustdrüsenschutz

Der spezielle Röntgenschutz für die Brustdrüsen schützt weibliche Patienten bei Röntgenuntersuchungen und bietet optimalen Patientenschutz.

- ✓ Spezieller Röntgenschutz für die Brustdrüsen
- ✓ Entwickelt für optimalen Patientenschutz



Gonadenkapsel

Umschließender Schutz für Penis und Scrotum mit einem Bleigleichwert von 1,00 mm Pb. Das Anlegen ist einfach und die Beschichtung bietet eine hervorragende Hygiene.

- ✓ Entwickelt für optimalen Patientenschutz
- ✓ Drei verschiedene Größen (S,M,L)



Gonadenschutz-Hose

Diese vielseitige Gonadenschutz-Hose bietet effektiven Röntgenschutz und hohen Tragekomfort.

- ✓ Effektiver Röntgenschutz
- ✓ Hoher Tragekomfort



Panoramaschürze Modellreihe SL 02

Die Panoramaröntgenschürze Modellreihe SL 02 bietet umfassenden Röntgenschutz und ist ideal für Zahn- und Kieferaufnahmen sowie Panorama- und seitliche Schädelaufnahmen.

- ✓ Bleigleichwert von 0,50 mm Pb auf jeder Frontseite für doppelten Schutz bei der Verschlussüberlappung
- ✓ Durchgriffe für die Arme ermöglichen bequemes Festhalten am Gerät und einfache Handhabung



Dentalschürze D Modellreihe SN 02

Die Dentalschürze D Modellreihe SN 02 bietet optimalen Schutz für Patienten bei zahnmedizinischen Röntgenaufnahmen, insbesondere beim Zahnstatus. Sie lässt sich leicht anlegen und wird bequem mit einem Kettchen am Hals verschlossen.

- ✓ Optimaler Patientenschutz bei zahnmedizinischen Röntgenaufnahmen
- ✓ Leicht umzulegen
- ✓ Bequem mit einem Kettchen am Hals verschlossen



Dentalschürze mit Rückenschutz DR Modellreihe SN 02

Die Dentalschürze mit Rückenschutz DR, Modellreihe SN 02, bietet umfassenden Röntgenschutz für Patienten und ist ideal für Panorama- und seitliche Schädelaufnahmen. Der verlängerte Rückenschutz gewährleistet optimalen Röntgenschutz während der gesamten Untersuchung.

- ✓ Umfassender Röntgenschutz
- ✓ Ideal für Panorama- und seitliche Schädelaufnahmen
- ✓ Verlängerter Rückenschutz für optimalen Schutz während der gesamten Untersuchung



Streustrahlen-Abdeckung

Die Streustrahlen-Abdeckung verbessert Ihre Bildaufnahmen, indem sie sich flexibel an die Krümmung des Aufnahmeobjekts anpasst und störende Überstrahlung reduziert.

- ✓ Optimierte Bildaufnahmen durch Anpassung an die Krümmung des Aufnahmeobjekts
- ✓ Reduziert störende Überstrahlung in den Randbereichen
- ✓ Deutliche Verbesserung der Bildqualität
- ✓ Teilweise gebogene Bleilamellen (keine Schaumstoffteile) für bessere Anpassung an liegende Patienten und das Aufnahmeobjekt

Modell SKR

Dieses Modell bietet optimalen Röntgenschutz für Wirbelsäulen- und Schädelaufnahmen und kombiniert hohe Sicherheit mit praktischen Befestigungsbändern.

- ✓ Ideal für Wirbelsäulen- und Schädelaufnahmen
- ✓ Effektiver Röntgenschutz
- ✓ Praktische Befestigungsbänder
- ✓ Sicherstellung einer präzisen Positionierung während der Aufnahmen



Röntgenschutzwickel

Der Röntgenschutzwickel bietet umfassenden Röntgenschutz für den Patienten und ist auch für CT-Anwendungen geeignet.

- ✓ Der Wickel umhüllt den Patienten vollständig
- ✓ Lässt sich durch die praktischen Klettbänder sicher fixieren
- ✓ Ideal für effektiven Patientenschutz und einfache Handhabung bei Röntgen- und CT-Untersuchungen



Patienten-Abdeckung

Unsere Patienten-Abdeckungen aus Bleigummi bieten effektiven Patientenschutz bei Diagnostik- und Therapieanwendungen.

- ✓ Der Überzug gewährleistet eine einfache Handhabung und optimale Abdeckung
- ✓ Maximiert Sicherheit und Röntgenschutz während der Behandlungen



CT Augen- und Schilddrüsenschutz

Unsere CT Augen- und Schilddrüsenschutzprodukte bieten erstklassigen Schutz für die strahlensensitiven Organe bei Schädel-CT-Untersuchungen. Die Augenlinse und die Schilddrüse sind besonders empfindlich gegenüber Strahlung, und es wird empfohlen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Strahlendosis zu minimieren. Unsere Schützer reduzieren die Strahlendosis signifikant, sogar ohne zusätzliche geräteseitige Schutzvorkehrungen.

- ✓ Effektiver Schutz für Augenlinse und Schilddrüse
- ✓ Deutliche Minderung der Strahlendosis
- ✓ Minimale Bildartefakte
- ✓ Einfache Handhabung und hygienische Einmalverwendung
- ✓ Bleifrei und latexfrei
- ✓ Problemlose Entsorgung
- ✓ CE-gekennzeichnet

CT- Augenschutz

Der CT-Augenschutz minimiert Artefakte durch ein integriertes Abstandspolster und sorgt für eine präzise Bildgebung. Hypoallergene Klebeflächen gewährleisten eine sichere Positionierung am Patienten.

Strahlenreduktion:

Bis zu 40%

Verkaufseinheit:

Erhältlich in einer praktischen Schachtel mit 10 Stück.

CT - Schilddrüsenschutz

Dieser Schilddrüsenschutz bietet eine exzellente Formanpassung und reduziert die Strahlenbelastung der Schilddrüse erheblich. Mit einem Bleigleichwert von 0,125 mm Pb sorgt er für eine Strahlenreduktion von bis zu 60 %.

Ideal für den Einsatz in der CT-Diagnostik, wird er in praktischen Schachteln mit je 10 Stück geliefert.



Aufbewahrungssysteme



Mobile Aufhängevorrichtungen mit Querstange Modell W6RWF / W10RWF

Die mobilen Aufhängevorrichtungen Modell W6RWF / W10RWF mit Querstange bieten eine praktische Lösung zur Aufbewahrung von 6 bzw. 10 Röcken.

Sie basieren auf dem bewährten Design der Modelle W6MF / W10MF und bieten zusätzliche Flexibilität und Ordnung für Ihre Röntgen-schutzkleidung.

- ✓ Basierend auf dem bewährten Design der Modelle W6MF / W10MF
- ✓ Verfügbar für 6 bzw. 10 Röcke
- ✓ Querstange für mehr Flexibilität und Ordnung
- ✓ Ideal für eine übersichtliche und platzsparende Aufbewahrung in Ihrem Arbeitsbereich



Mobile Aufhängevorrichtungen Modell W6MF / W10MF

Die mobilen Aufhängevorrichtungen Modell W6MF und W10MF bieten eine platzsparende und praktische Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Röntgenschrürzen.

- ✓ Praktische und platzsparende Lösung zur Aufbewahrung von 6 bzw. 10 Röntgenschrürzen
- ✓ Stabiler, pulverbeschichteter Rahmen aus Vierkantrrohr
- ✓ Robuste Wandaufhänger aus V2A mit langlebiger Grundplatte und Bügeln
- ✓ 75 mm leitfähige Rollen für mühelose Beweglichkeit
- ✓ Ideal für eine griffbereite und ordentliche Aufbewahrung



Wandaufhänger zur Aufbewahrung von 1 bis 10 Röntgenschürzen Modell W1M bis W10M

Der Wandaufhänger Modell W1M bis W10M ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung von 1 bis 10 Röntgenschürzen. Er überzeugt durch seine robusten, schwenkbaren Bügel und eine hohe Tragekraft.

- ✓ Platzsparende Aufbewahrung für 1 bis 10 Röntgenschürzen
- ✓ Schwenkbare Bügel aus robustem V2A
- ✓ Tragekraft von 8-10 kg pro Bügel



Wandaufhänger für Röntgenschürzen Modell WM

Der Wandaufhänger Modell WM erleichtert das An- und Ablegen von Röntgenschürzen und sorgt für eine effiziente und platzsparende Aufbewahrung.

- ✓ Gleitet einfach von der Schulter auf die Tragebügel
- ✓ Für andere Röntgenschürzentypen ebenso geeignet
- ✓ Ideal für eine effiziente und platzsparende Aufbewahrung



Holzbügel


Holzbügel aus natur lackierter Buche mit stabilem Haken.



- ✓ Standardmäßig bei den meisten Röntgenschürzen enthalten
- ✓ Auch einzeln erhältlich

Schellenhaken mit Schutzkappe

1 Paar Schellenhaken für die sichere Aufhängung von Röcken, zur Anbringung am Bügel der schwenkbaren Wandaufhänger.

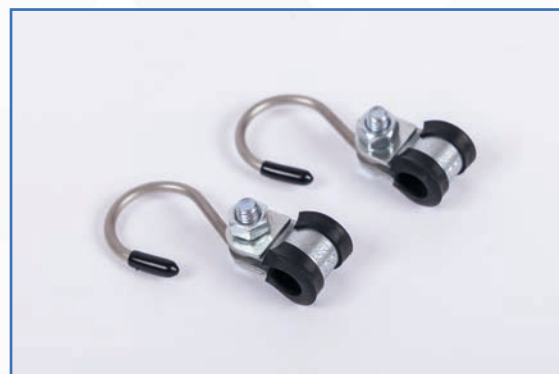

Wandaufhänger für 4 Halbröntgenschürzen mit Hüftspannbügel Modell WHSP

Der Wandaufhänger Modell WHSP bietet eine praktische Lösung für die Aufbewahrung von bis zu vier Halbschürzen.



- ✓ Robuste Metallplatte ermöglicht einfaches einhängen
- ✓ Ordentliche und platzsparende Lagerung

Wandaufhänger für Röntgenschürzen und Handschuhe Modell WMH

Ideal zum Aufhängen von Röntgenschürzen
und 1 Paar Handschuhe.



Reismehlsäcke

Ideal zur Stabilisierung und Lagerung von Patienten. Mit abwaschbarer SupraSoft-Außenhülle für einfache Pflege. Reinigung und Desinfektion mit Suprapflege (siehe Seite 37)



Patienten-Auflagedecke mit Mittelstrich

Die Patienten-Auflagedecke mit Mittelstrich ist eine hochwertige Schaumstoffunterlage für Rasteraufnahme, die in einer abwaschbaren Außenhülle geliefert wird. Sie ist ausgestattet mit Klettbindern zur sicheren Befestigung am Buckytisch und rutschfesten Streifen, die ein Verschieben der Decke verhindern. Jeder Satz enthält drei Streifen zur Befestigung und Verbesserung der Haftung. Die Auflagedecke lässt sich einfach mit Suprapflege reinigen und desinfizieren (siehe Seite 37).



Patienten Lagerungshilfen

Röntgen-Set

Dieses Set wird komplett in einer Kunststoff-Box geliefert und enthält eine vielseitige Auswahl an Komponenten für Ihre Bedürfnisse.

Bestehend aus:

- 1 Rundplatte (81352)
- 1 Ringplatte (81332)
- 1 Rolle (80592)
- 1 Rechteck (81732)
- 2 Dreiecke (81412)
- 2 Dreiecke (81422)
- 2 Keile (81512)



Kopfunterlage Hinterkopf

Erwachsene 81002
(25,0 x 24,5 x 9,5 cm)

Kinder 81012
(21,5 x 23,0 x 7,0 cm)

Kopfunterlage Gesicht

Erwachsene 81022
(26,0 x 21,0 x 10,0 cm)

Kinder 81032
(22,5 x 18,0 x 7,0 cm)


Kopfunterlage seitlich

Erwachsene
(31,5 x 31,0 x 9,0 cm)



- links 81052
- rechts 81062

Kinder
(28,5 x 28,5 x 7,0 cm)

- links 81072
- rechts 81082


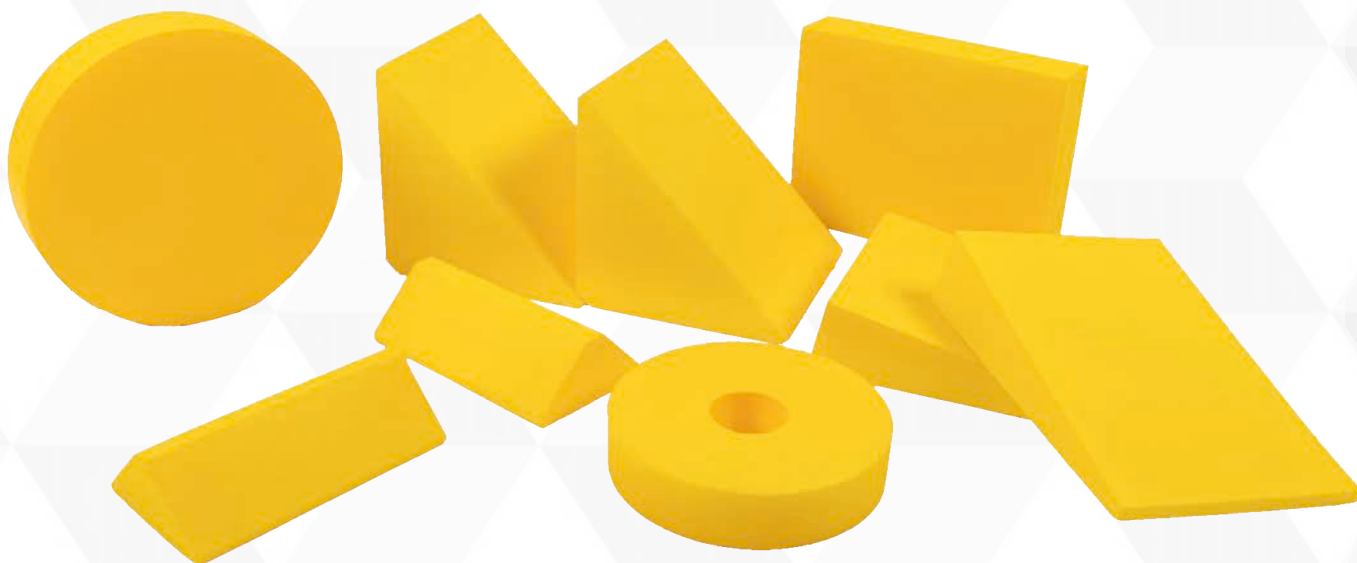


81332
Ringplatte
Ø 18 x 5cm

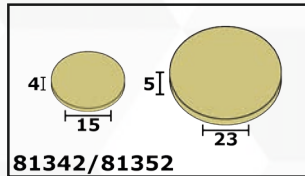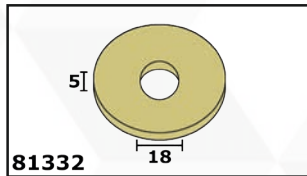



81342
Rundplatte Ø 15 x 4cm
81352
Rundplatte Ø 23 x 5cm

81702
Rechteck
36 x 24 x 3cm

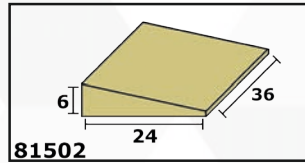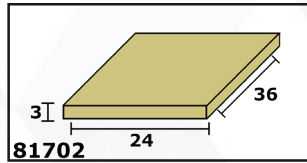



81502
Keil, 15°
36 x 24 x 6/1cm

81712
Rechteck
18 x 24 x 3cm

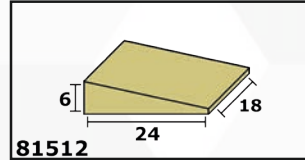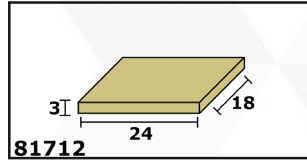



81512
Keil, 15°
18 x 24 x 6/1cm

81722
Rechteck
36 x 24 x 5cm

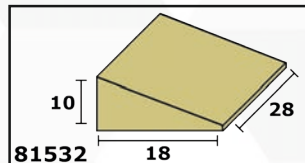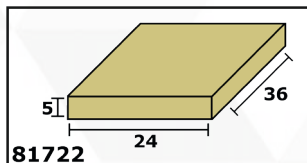



81532
Keil, 20°
28 x 18 x 10/1cm

81732
Rechteck
18 x 24 x 5cm

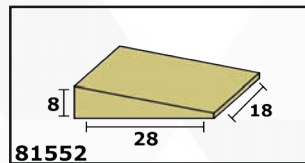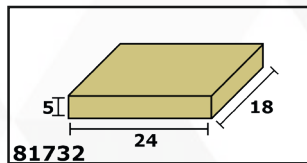



81552
Keil, 15°
18 x 28 x 8/1cm

81382
Körperstütze
30 x 40 x 18cm

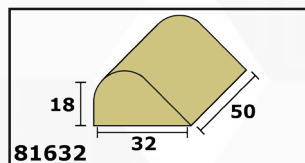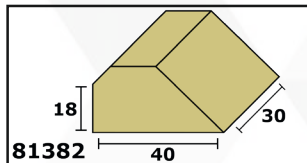



81632
Nackenunterlage
50 x 32 x 18cm

80592
Rolle
Ø 10 x 25cm

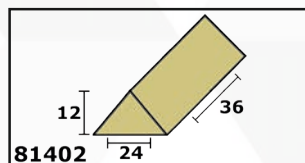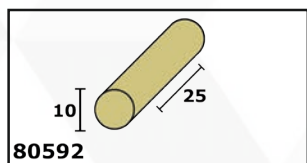



81402
Dreieck, gleichschenklig 45°
36 x 24 x 12cm

81602
Halbrolle
Ø 22/11 x 36cm

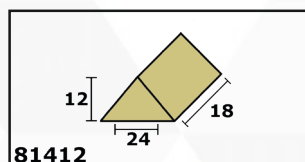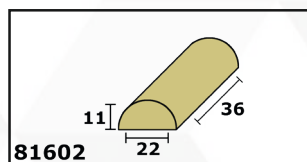



81412
Dreieck, gleichschenklig 45°
18 x 24 x 12cm

81612
Halbrolle
Ø 22/11 x 18cm

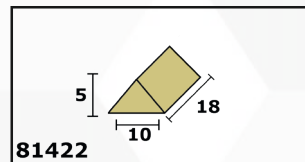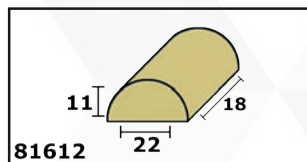



81422
Dreieck, gleichschenklig 45°
18 x 10 x 5cm

81622
Halbrolle
Ø 15/7,5 x 36cm

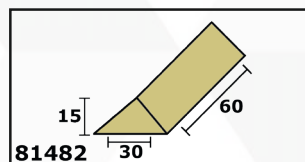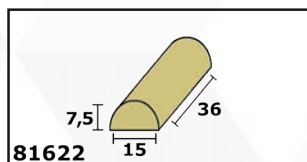

81482
Dreieck, ungleichschenklig 45°
60 x 30 x 15cm

81632
Halbrolle
Ø 15/7,5 x 18cm

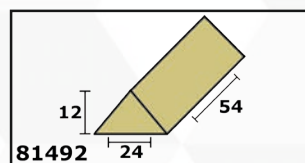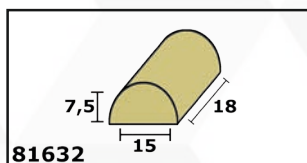

81492
Dreieck, gleichschenklig 45°
54 x 24 x 12cm

Röntgen-Filmmarkierungen

L (gelb) und R (rot)

aus Kunststoff 3 mm dick
Schrifthöhe: 15 mm (Standard), lieferbar auch in 10 mm und 20 mm Schablonengröße, Standard: (H) 28 x (B) 20 mm



L (gelb) und R (rot) mit Initialen

aus Kunststoff 3 mm dick
Buchstaben bzw. Zahlen max. 3 Zeichen
Schrifthöhe L und R: 15 mm
Schrifthöhe Initial: 5 mm



L und R aus Kunststoff mit Kettchen verbunden

Schrifthöhe: 15 mm

L und R am Kettchen

Rund, aus Messing vernickelt
Schrifthöhe: ca. 15 mm



L und R Clip

Diese Clips aus rostfreiem Stahl bieten eine zuverlässige Befestigung auf Kassetten. Sie lassen sich einfach aufkleben und garantieren eine sichere und stabile Fixierung. Ideal für den professionellen Einsatz. Schrifthöhe: 10 mm (ap)



Magnetträger mit 2 Satz L und R

Magnetträger mit 2 Sätzen L und R: Ideal für Buckytische, Rasterladen und Rasterwandstative. Geeignet für Aufnahmen im anteroposterioren (AP) und posteroanterioren (PA) Bereich.

Röntgen-Filmmarkierungen

Texte Schrifthöhe 5 mm

Standardtexte:

unten, oben, hinten, vorn, innen,
außen, medial, lateral, seitlich, stehend,
liegend, sitzend, Leeraufnahme, nach
Reizmahlzeit, min. n. Reiz, Bauchlage,
Rückenlage.

Weitere Texte nach Angabe lieferbar.



Röntgenlineal

aus grauem Kunststoff

Länge: 10 bis 150 cm

Einteilung: 2 mm

Breite: 4 cm

Buchstaben A - Z

1 Satz = 26 Stück

Schrifthöhen-Optionen:

Schrifthöhe: 7,5 mm

(Standard) Schrifthöhe:

10 mm

Schrifthöhe: 15 mm

Zahlen 0 - 9

1 Satz = 13 Stück

(1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
0, 1/2)

Schrifthöhen-Optionen:

Schrifthöhe: 7,5 mm (Stan-

dard) Schrifthöhe: 10 mm

Schrifthöhe: 15 mm

**Obige Texte, Buchstaben und Zahlen
sind auf Wunsch mit Magnet lieferbar**

Auf Anfrage:

Textschablonen für Mammographie

mit und ohne Magnet lieferbar

Halteplatte

zur Aufbewahrung von Textschablonen,
Zahlen und Buchstaben

Behälter aus PVC

zur Aufbewahrung von Textschablonen,
Zahlen und Buchstaben

Abdeckset für Röntgenkassetten

Das Abdeckset für Röntgenkassetten bietet eine effektive Lösung für die Ein- und Ausblendung Ihrer Röntgenaufnahmen. Es umfasst zwei Bleigummi-Lappen, jeweils mit einem Bleigleichwert von 0,80 mm, die in abwaschbare SupraTex-Hüllen eingenäht sind.

Formate:

23 x 38 cm und 19 x 45 cm

Geeignet für alle gängigen Filmvormate von:

13 x 18 cm bis 35 x 43 cm

Im Längs- bzw Querformat und können ein- und ausgeblendet werden

Zusätzlich:

Die praktischen Klettbänder (5 cm breit) ermöglichen einen flexiblen Einsatz, und das Set kann auch als zusätzliche Abdeckung für den Patientenschutz verwendet werden.



Kassetten-Abdeckung

Unsere Kassetten-Abdeckung ist in den Außenmaßen der Kassetten (**Nennmaße + 2,5 cm**) oder halbiert erhältlich. Sie besteht aus Einschichtmaterial mit 0,8 mm Pb und bietet effektiven Röntgenschutz.

Einschichtmaterial

Wir bieten unser „Einschichtmaterial schwarz“ zum Selbstzuschchnitt in 0,25 mm, 0,50 mm, 0,80 mm und 1,0 mm Pb an.



Röntgenschutzvorhang

Der Röntgenschutzvorhang eignet sich für die Abdeckung von Durchgängen, Schaltkabinen, Arbeitsplatztrennungen und Fensterabdeckungen. Er kann als Doppel- oder Mehrfachvorhang genutzt und leicht verschoben werden. Der überlappende Doppelvorhang erleichtert den Zugang durch die Mitte.

Maße

Maximalbreite von 120 cm, Länge beliebig – übliche Ausführungen sind 200 cm bis 220 cm.

Für größere Breiten können Vorhänge durch Druckknöpfe überlappend verbunden werden. Die Vorhänge sind oben stabil eingefasst und mit Ösen und Haken für die einfache Montage an Rollen ausgestattet.



Aufhängung

Die Schiene besteht aus gezogenem Stahl und wird komplett mit Rollen, Feststellern sowie Deckenträgern oder Wandträgern geliefert.


Deckenträger



Wandträger



Haken

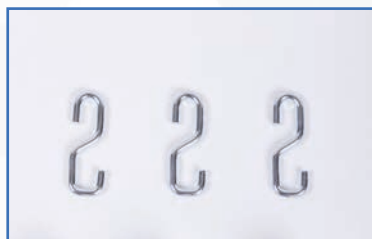

Feststeller



Rolle





Dr. Goos-Suprema GmbH
Brechtelstraße 29
69126 Heidelberg
Telefon: +49 6221 337179
Fax: +49 6221 372166
info@drgoos-suprema.de
www.drgoos-suprema.de